






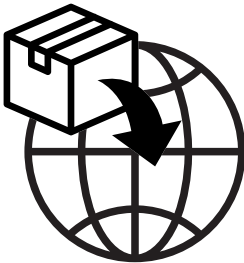










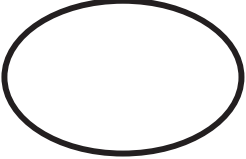
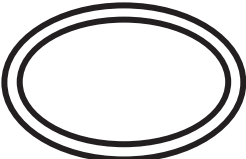
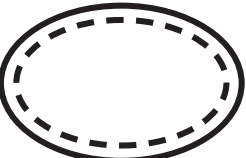
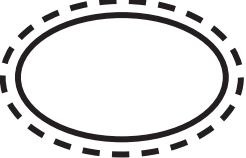
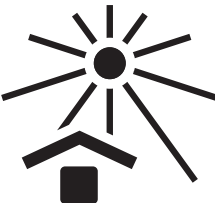

# Standardsümbolite sõnastik

Tähis	Standard	Viite-number	Nimetus	Kirjeldus
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.1.1	Tootja	Näitab meditsiiniseadme tootjat, nii nagu see on määratletud EL-i direktiivides 90/385/EMÜ, 93/42/EMÜ, 98/79/EÜ ja EL-i määruses 2017/745.
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.1.2	Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses / Euroopa Liidus	Näitab volitatud esindajat Euroopa Ühenduses / Euroopa Liidus.
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.1.3	Tootmise kuupäev	Näitab meditsiiniseadme tootmise kuupäeva.
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.1.4	Kasutamise lõppkuupäev	Näitab kuupäeva, pärast mida ei tohi meditsiiniseadet kasutada.
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.1.5	Partii kood / Partii number	Näitab tootja partii koodi, et partiid oleks võimalik tuvastada.




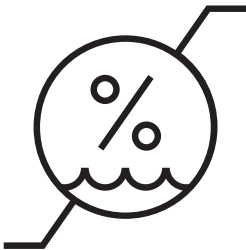
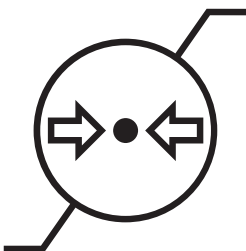

Tähis	Standard	Viite-number	Nimetus	Kirjeldus
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.1.6	Kataloogi-number	Näitab tootja katalooginumbrit, et meditsiiniseadet oleks võimalik tuvastada.
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.1.7	Seerianumber	Näitab tootja seerianumbrit, et kindlat meditsiiniseadet oleks võimalik tuvastada.
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.1.8*	Importija	Näitab meditsiiniseadme antud asukohta importivat üksust
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.2.1	Steriilne	Näitab meditsiiniseadet, mis on läbinud steriliseerimisprotsessi.
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.2.2	Steriliseeritud aseptilisi töötlemisviise kasutades	Näitab meditsiiniseadet, mis on toodetud tunnustatud aseptilisi töötlemisviise kasutades.
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.2.3	Steriliseeritud etüleenoksiidi kasutades	Näitab meditsiiniseadet, mis on steriliseeritud etüleenoksiidi kasutades.




\*ISO nõuetega kooskõlla viimist ootavaid heakskiidetud tähiseid tähistatakse viitenumbri veerus tärniga.

Tähis	Standard	Viite-number	Nimetus	Kirjeldus
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.2.4	Steriliseeritud kiiritamist kasutades	Näitab meditsiiniseadet, mis on steriliseeritud kiiritamist kasutades.
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.2.6	Mitte steriliseerida korduvalt	Näitab meditsiiniseadet, mida ei tohi korduvalt steriliseerida.
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.2.7	Mittesteriilne	Näitab meditsiiniseadet, mida pole steriliseeritud.
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.2.8	Ärge kasutage kahjustatud pakendi korral ja tutvuge kasutusjuhiste	Näitab meditsiiniseadet, mida ei tohi kasutada, kui pakend on kahjustatud või avatud ning et kasutaja peab lisateabe saamiseks lugema kasutusjuhiseid.
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.2.9	Steriilne vedelikutee	Näitab steriilse vedelikutee olemasolu meditsiiniseadmes juhul, kui meditsiiniseadme muud osad, sealhulgas välised, pole tarnitud steriilsena.




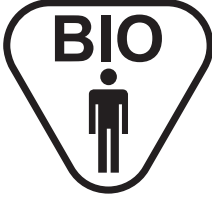
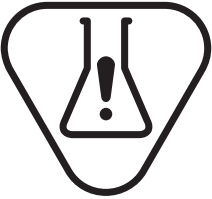
Tähis	Standard	Viite-number	Nimetus	Kirjeldus
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.2.11*	Ühekordne steriilne kaitsemeetod	Näitab ühekordset steriilset kaitsemeetodit.
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.2.12*	Kahekordne steriilne kaitsemeetod	Näitab kahekordset steriilset kaitsemeetodit.
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.2.13*	Ühekordne steriilne kaitsemeetod koos kaitsva sisepakendiga	Näitab ühekordset steriilset kaitsemeetodit koos kaitsva sisepakendiga.
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.2.14*	Ühekordne steriilne kaitsemeetod koos kaitsva välispakendiga	Näitab ühekordset steriilset kaitsemeetodit koos kaitsva välispakendiga.
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.3.2	Hoida päikese- valgusest eemal	Näitab meditsiiniseadet, mis vajab kaitset valgusallikate eest.
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.3.4	Hoida kuiv	Näitab meditsiiniseadet, mis vajab kaitset niiskuse eest.

\*ISO nõuetega kooskõlla viimist ootavaid heakskiidetud tähiseid tähistatakse viitenumbri veerus tärniga.

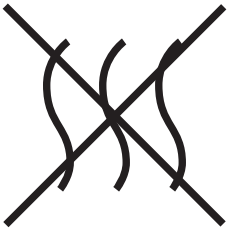
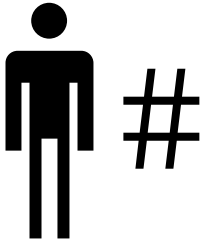

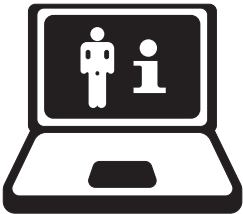

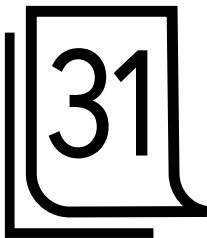
Tähis	Standard	Viite-number	Nimetus	Kirjeldus
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.3.5	Temperatuuri alampiir	Näitab meditsiiniseadmele lubatavat ohutut temperatuuri alampiiri.
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.3.6	Temperatuuri ülempiir	Näitab meditsiiniseadmele lubatavat ohutut temperatuuri ülempiiri.
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.3.7	Temperatuuri- piirang	Näitab meditsiiniseadmele lubatavat ohutut temperatuuri- vahemikku.
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.3.8	Niiskuspääirang	Näitab meditsiiniseadmele lubatavat ohutut niiskususvahemikku.
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.3.9	Atmosfäärirõhu piirang	Näitab meditsiiniseadmele lubatavat ohutut atmosfäärirõhu vahemikku.
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.4.2	Mitte kasutada korduvalt / Ainult ühekordseks kasutamiseks	Näitab meditsiiniseadet, mis on ette nähtud üksnes ühekordseks kasutamiseks.

Tähis	Standard	Viite-number	Nimetus	Kirjeldus
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.4.3	Tutvuge kasutusjuhistega või elektrooniliste kasutusjuhistega	Näitab, et kasutaja peab tutvuma kasutusjuhistega
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.4.4	Ettevaatust <b>MÄRKUS.</b> Selle tähise määratlust on 2020. aastal muudetud ja see eemaldatakse Cooki märgistelt. Kui see tähis leitakse Cooki märgiselt, on õige paremal asuv (eelmine) määratlus.	Näitab, et kasutaja peab tutvuma kasutusjuhistega olulise hoiatusteabe, näiteks hoiatuste ja ettevaatusabinõude osas, mida mitmesugustel põhjustel ei saa meditsiiniseadme enda peal esitada.
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.4.4*	Ettevaatust <b>MÄRKUS.</b> Kui see tähis on kantud otse meditsiiniseadmele, on õige paremal asuv määratlus.	Näitab, et seadme või juhtelemendi kasutamisel tuleb olla ettevaatlik tähise asukoha lähedal või et praegune olukord vajab soovimatute tagajärgede vältimiseks kasutaja teadlikkust või tegevust.
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.4.5	Loodusliku kautšukilateksi sisaldus või olemasolu	Näitab kuiva loodusliku kautšuki või loodusliku kautšukilateksi olemasolu meditsiiniseadme või selle pakendi aine koostises.

\*ISO nõuetega kooskõlla viimist ootavaid heakskiidetud tähiseid tähistatakse viitenumbri veerus tärniga.



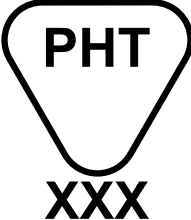
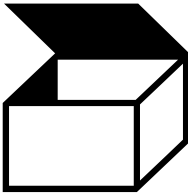

Tähis	Standard	Viite-number	Nimetus	Kirjeldus
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.4.6*	Sisaldab või hõlmab inimese vere- või plasma- preparaate	Näitab meditsiiniseadet, mis sisaldab või hõlmab inimese vere- või plasmapreparaate.
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.4.7*	Sisaldab ravimainet	Näitab meditsiiniseadet, mis sisaldab või hõlmab ravimainet.
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.4.8*	Sisaldab loomset päritolu bioloogilist ainet	Näitab meditsiiniseadet, mis sisaldab loomset päritolu bioloogilisi kudesid, rakke või nende preparaate.
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.4.9*	Sisaldab inimpäritolu bioloogilist ainet	Näitab meditsiiniseadet, mis sisaldab inimpäritolu bioloogilisi kudesid, rakke või nende preparaate.
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.4.10*	Sisaldab ohtlikke aineid	Näitab meditsiiniseadet, mis sisaldab võimalikult kantserogeenseid, mutageenseid või reproduktiivtoksilisi (CMR) või endokriinseid häireid põhjustavate omadustega aineid.

\*ISO nõuetega kooskõlla viimist ootavaid heakskiidetud tähiseid tähistatakse viitenumbri veerus tärniga.


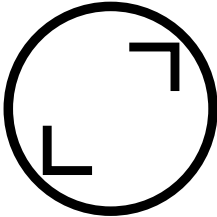
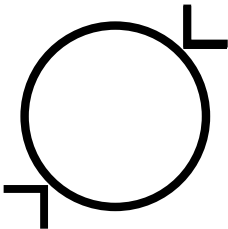


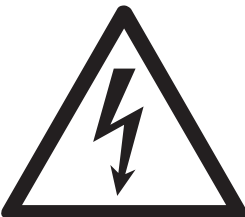
Tähis	Standard	Viite-number	Nimetus	Kirjeldus
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.6.3	Mittepürogeenne	Näitab meditsiiniseadet, mis on mittepürogeenne.
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.7.1*	Patsiendi number	Näitab üksikpatsiendiga seotud kordumatut numbrit
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.7.3*	Patsiendi tuvastamine	Näitab patsiendi tuvastamisandmeid.
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.7.4*	Patsienditeabe veebisait	Näitab vörgulehte, kust patsient saab meditsiinitoote kohta lisateavet.
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.7.5*	Tervishoiukeskus või arst	Tervishoiukeskuse või arsti aadressi näitamiseks, kust võib leida patsiendi kohta meditsiinilist teavet.
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.7.6*	Kuupäev	Teabe sisestamise või meditsiinilise protseduuri kuupäeva tuvastamiseks.







\*ISO nõuetega kooskõlla viimist ootavaid heakskiidetud tähiseid tähistatakse viitenumbri veerus tärniga.

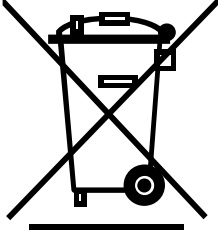
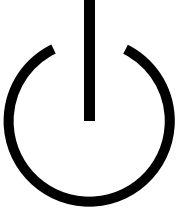


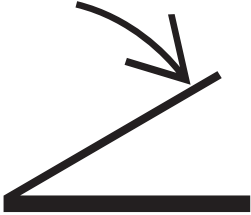


Tähis	Standard	Viite-number	Nimetus	Kirjeldus
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.7.7*	Meditsiiniseade	Näitab, et toode on meditsiiniseade.
	<b>ISO 15223-1</b> Meditsiiniseadmed - tähised, mida kasutatakse meditsiiniseadmete märgistuse, siltide ja edastatava teabega	5.7.10*	Seadme kordumatu identifitseeri- mistunnus	Näitab kandjat, mis sisaldab teavet seadme kordumatu identifitseeri- mistunnuse kohta.
	<b>ISO 7000/IEC 60417</b> Graafilised kujutised seadmestikul kasutamiseks  <b>BS EN 15986</b> Meditsiiniseadmete märgistamisel kasutatav tähis - Ftalaate sisaldavate meditsiiniseadmete märgistamise nõuded	2725	Ühe või mitme ftalaadi sisaldus või olemasolu,  ftalaadi/ ftalaatide keemiline/-sed lühend(id) xxxx	Näitab, et meditsiiniseade sisaldab ühte või mitut ftalaati.
	<b>ISO 7000/IEC 60417</b> Graafilised kujutised seadmestikul kasutamiseks	2794	Pakend	Tükiarvu näitamiseks pakendis.
	<b>ISO 7000/IEC 60417</b> Graafilised kujutised seadmestikul kasutamiseks	5333	BF-tüüpi kontaktosa	Standardile IEC 60601-1 vastava BF-tüüpi kontaktosa tuvastamiseks.

\*ISO nõuetega kooskõlla viimist ootavaid heakskiidetud tähiseid tähistatakse viitenumbri veerus tärniga.

Tähis	Standard	Viite-number	Nimetus	Kirjeldus
	<b>ISO 7000/IEC 60417</b> Graafilised kujutised seadmestikul kasutamiseks	5840	B-tüüpi kontaktosa	Standardile IEC 60601-1 vastava B-tüüpi kontaktosa tuvastamiseks.
	<b>ISO 7000/IEC 60417</b> Graafilised kujutised seadmestikul kasutamiseks	5845	Siseläbimõõt	Siseläbimõõdu viite näitamiseks.
	<b>ISO 7000/IEC 60417</b> Graafilised kujutised seadmestikul kasutamiseks	5846	Välisläbimõõt	Välisläbimõõdu viite näitamiseks.
	<b>ISO 7010</b> Graafilised kujutised - Ohutusvärvid ja ohutusmärgid - Registreeritud ohutusmärgid	M002	Vaadake kasutusjuhendit/ brošüüri	Kasutusjuhendi/ brošüüri lugemise kohustuse tähistamiseks.
	<b>ISO 7010</b> Graafilised kujutised - Ohutusvärvid ja ohutusmärgid - Registreeritud ohutusmärgid	W001	Üldine hoiatusmärk	Üldise hoiatuse tähistamiseks.
	<b>ISO 7010</b> Graafilised kujutised - Ohutusvärvid ja ohutusmärgid - Registreeritud ohutusmärgid	W012	Hoiatus: elekter	Elektri eest hoiatamiseks.

Tähis	Standard	Viite-number	Nimetus	Kirjeldus
	<b>ASTM F2503-20</b> Meditsiiniseadmete ja muude toodete märgistamise tava ohutuse tagamiseks magnetresonantsi (MR) keskkonnas	Joonis 2	MR-ohutu	Toode, mis ei tekita MR-keskkonnaga kokkupuutest tulenevalt teadaolevaid terviseriske.
	<b>ASTM F2503-20</b> Meditsiiniseadmete ja muude toodete märgistamise tava ohutuse tagamiseks magnetresonantsi (MR) keskkonnas	Joonis 4	MR-ohutu	Toode, mis ei tekita MR-keskkonnaga kokkupuutest tulenevalt teadaolevaid terviseriske.
	<b>ASTM F2503-20</b> Meditsiiniseadmete ja muude toodete märgistamise tava ohutuse tagamiseks magnetresonantsi (MR) keskkonnas	Joonis 5	Testitud tingimustes lubatud kasutada MRI uuringus	Määratletud tingimustel tõendatud ohutusega toode MR-keskkonnas.
	<b>ASTM F2503-20</b> Meditsiiniseadmete ja muude toodete märgistamise tava ohutuse tagamiseks magnetresonantsi (MR) keskkonnas	Joonis 6	Testitud tingimustes lubatud kasutada MRI uuringus	Määratletud tingimustel tõendatud ohutusega toode MR-keskkonnas.
	<b>ASTM F2503-20</b> Meditsiiniseadmete ja muude toodete märgistamise tava ohutuse tagamiseks magnetresonantsi (MR) keskkonnas	Joonis 8	MR-ohulik	Toode, mis esitab vastuvõetamatuid ohte patsiendile, meditsiinitöötajatele või teistele MR-keskkonnas viibivaile isikuile.
	<b>ASTM F2503-20</b> Meditsiiniseadmete ja muude toodete märgistamise tava ohutuse tagamiseks magnetresonantsi (MR) keskkonnas	Joonis 9	MR-ohulik	Toode, mis esitab vastuvõetamatuid ohte patsiendile, meditsiinitöötajatele või teistele MR-keskkonnas viibivaile isikuile.

Tähis	Standard	Viite-number	Nimetus	Kirjeldus
	<p><b>BS EN 50419</b></p> <p>Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamine vastavalt direktiivi 2002/96 EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) artikli 11 lõikele 2</p> <p><b>WEEE (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) direktiiv 2012/19/EL</b></p>	Joonis 1	Taastöödeldav: elektroonikaseadmed	Elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumine.
	<p><b>IEC 60417</b></p> <p>Graafilised kujutised seadmestikul kasutamiseks</p>	5009	Ooterežiiml	Selle lüliti või lüliti asendi tuvastamiseks, mille abil lülitatakse sisse seadmestiku osa selle ooteseisundisse viimiseks.
	<p><b>IEC 60417</b></p> <p>Graafilised kujutised seadmestikul kasutamiseks</p>	5031	Alalisvool	Näitamiseks andmesildi, et seadmeid saab kasutada üksnes alalisvooluga; asjakohaste klemmide tuvastamiseks.
	<p><b>IEC 60417</b></p> <p>Graafilised kujutised seadmestikul kasutamiseks</p>	5032	Vahelduvvool	Näitamiseks andmesildi, et seadmeid saab kasutada üksnes vahelduvvooluga; asjakohaste klemmide tuvastamiseks.
	<p><b>IEC 60417</b></p> <p>Graafilised kujutised seadmestikul kasutamiseks</p>	5114	Jalglüliti	Jalglüliti või selle ühenduse tuvastamiseks.

Tähis	Standard	Viite-number	Nimetus	Kirjeldus
<b>IPN<sub>1</sub>N<sub>2</sub></b>	<b>IEC 60529</b> Ümbristega tagatavad kaitseastmed (IP-kood)	Ei kohaldu.	Kaitseaste sissetungimise eest  <b>MÄRKUS.</b> Mida suurem arv, seda parem kaitse. Kui numbrit pole vaja täpsustada, asendatakse see tähega X.	Esimene number näitab ümbrise kaitseastet tahkete võõrkehade sissetungimise eest.  Teine number näitab ümbrises oleva seadmestiku kaitseastet vedelike sissetungimise eest.
<b>Rx only</b>	<b>21 CFR 801.15</b> <b>21 CFR 801.109</b>	(c) (1) (i) (F)  (b) (1)	Üksnes retseptiga	Ettevaatust! USA föderaalseaduste kohaselt on lubatud seda seadet müüa ainult arstil või tema korraldusel.
<b>CE</b>	<b>MDD 93/42/EEC</b> <b>MDR 2017/745</b> <b>Määrus (EÜ) 765/2008</b>	XII lisa  Artikkel 20  II lisa	CE-märgis, võib sisaldada teavitatud asutust, viitenumbriga xxxx	Tähistab Euroopa tehnilist vastavust.
<b>Australian Sponsor</b>	<b>Regulation 10.2 (Määrus 10.2)</b>  Therapeutic Goods (Medical Devices) Regulations 2002 (Ravitooted (meditsiiniseadmed) 2002. a määrused)	Essential Principle  13.2 & 13.3  (Oluline põhimõte 13.2 ja 13.3)	Austraalia sponsor	Identifitseerib Austraalia sponsori.

Tähis	Standard	Viite- number	Nimetus	Kirjeldus
<b>UK CA</b>	Medicines and Medical Devices Act 2021 (Ravimite ja meditsiiniseadmete seadus, 2021)	4. osa, 1. peatükk, paragrahv 16 (1) (f)	UKCA märgis	Tähistab Suurbritannia tehnilist vastavust.

\*ISO nõuetega kooskõlla viimist ootavaid heakskiidetud tähiseid tähistatakse viitenumbri veerus tärniga.